



Imbrasul
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Master Win®

GUIA DO USUÁRIO

Bolsa de Urostomia MASTER WIN® de uma peça

Siga o passo a passo para uma aplicação segura, confortável e eficaz.



Limpe a pele ao redor do estoma com água morna ou soro fisiológico.



Corte o orifício na placa de acordo com o tamanho e formato do estoma.



Coloque gaze sobre o estoma para impedir a saída de exsudatos durante a fixação da placa.




Abra a válvula de drenagem localizada na parte inferior da bolsa para garantir que esteja aberta e desobstruída.



Após o esvaziamento (quando necessário), feche a válvula de drenagem pressionando até ouvir um clique, garantindo o fechamento seguro.



Retire a película de proteção do adesivo.

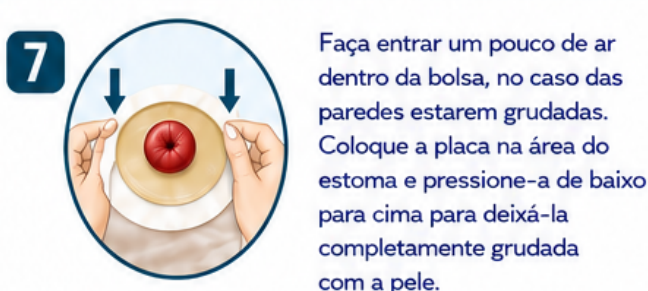

Faça entrar um pouco de ar dentro da bolsa, no caso das paredes estarem grudadas. Coloque a placa na área do estoma e pressione-a de baixo para cima para deixá-la completamente grudada com a pele.



Abra a válvula de drenagem para esvaziar a bolsa quando necessário. Após o esvaziamento, limpe e seque a válvula e feche-a bem para o próximo uso.

ATENÇÃO:

-  A bolsa de urostomia é usada apenas por pacientes urostomizados.
-  Normalmente a placa pode ser usada de 5 a 7 dias, porém a capacidade adesiva será afetada pelo uso contínuo.
-  A bolsa de urostomia não pode ser reciclada.
-  A bolsa de urostomia não pode ser jogada em vaso sanitário e em tubulação cloacal, nem descartada em qualquer local à sua vontade. Por favor, preste atenção na proteção do meio ambiente.
-  Pacientes alérgicos ao adesivo devem usá-la com cautela.



CUIDAR BEM DO SEU ESTOMA É
CUIDAR DA SUA **QUALIDADE DE VIDA.**



Em caso de dúvidas,
consulte um profissional
de saúde.